


Komplett.  
Kompetent.  
Konstant.



www.W20.de

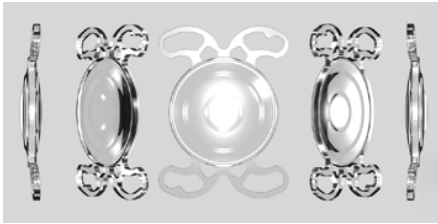

## MINI WELL®

hydrophil

EDOF

asphärisch

4 Haptiken

preloaded

klar

**Optik-/Gesamtdurchmesser**  
6,0 mm / 10,75 mm

**Refraktiver Index**  
1,46 (bei 35 °C)

**Haptik**  
4 geschlossene Haptiken,  
5° Anwinkelung

### Material


Copolymeres hydrophiles Acrylat mit hydrophober Oberfläche, Wassergehalt 25 %

### Optikdesign

- Multifokales Prinzip: progressive IOL mit erweitertem Schärfentiefebereich (extended depth of focus - EDOF)
- Nahaddition von +3 dpt
- Bikonvex progressiv
- Umlaufend doppelt scharfe Kanten zur Nachstarreduktion

### Optimierte IOL-Konstanten\*

nominal	Haigis	HofferQ	HofferQST	Holladay	SRK/T
118,6	a0=-2,079 a1=0,311 a2=0,248	pACD=5,32	pACD=5,32	sf=1,56	A=118,64
Barrett	Olsen	Kane	EVO		
LF=1,59 A=118,44	C-Konstante=0,356 ACD=4,62	A=118,52	A=118,53		

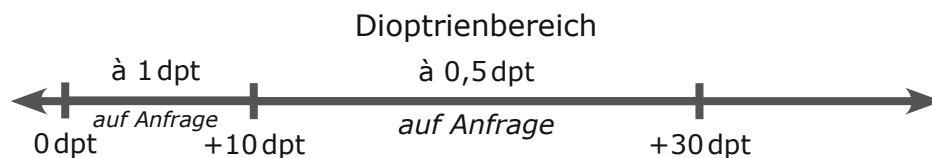

Hersteller: SIFI

\*Herstellerangabe

## Vorderer Augenabschnitt - Implantate