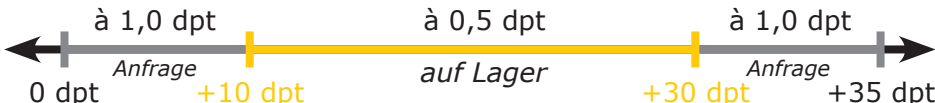



Orizon™ SDHBPY

hydrophob, monofokal, asphärisch, C-Loop, pre-loaded, gelb

Material	Biokompatibles hydrophobes Acrylat				
Refraktiver Index	1,49				
UV-Schutz	Ja				
Design	• Asphärisch • Bikonvexe Oberfläche • Einteilige, faltbare IOL • 360° scharfe Kante zur Nachstarreduktion • Einkerbungen zur einfachen IOL-Manipulation • Sphärische Abberation von -0,25 µm				
Optik- / Gesamtdurchmesser	6,0 mm / 13,0 mm				
Haptik	C-Haptik, 0° Anwinklung				
Theoretische A-Konstante (optisch)	118,5				
Theoretische Vorderkammertiefe (optisch)	5,39 mm				
IOL Konstanten*	nominal	Haigis	HofferQ	Holl. 1	Holl. 2
	118,5	a0=0,472 a1=0,077 a2=0,174	pACD=5,39	SF=1,62	5,19
	SRK/T	SRK II			
	A=118,7	A=118,9			
Dioptrienbereich					
Inzisionsgröße	≥2,2 mm mit beiliegendem Mediceal Push-Injektor				
Besonderheiten	• Hervorragende Qualität des Rohmaterials durch vorgeformte Rohlinge • Mit konvexen Oberflächen, die Auswirkungen von Neigung, Dezentrierung und Abberation minimieren • Kerben für eine reibungslose Manipulation • Konsignationslager können maximal von +10 dpt bis +30 dpt zur Verfügung gestellt werden				
Hersteller: Sidapharm	1 Stück SDHBPY				STERILE

*Herstellerangabe

Implantate Vorderer Augenabschnitt