



MINI WELL PROXA TORIC®

hydrophil

EDOF

asphärisch

4 Haptiken

preloaded

klar

torisch

Optik-/Gesamtdurchmesser

6,0 mm / 10,75 mm

Refraktiver Index

1,46 (bei 35 °C)

Haptik

4 geschlossene Haptiken,
5° Anwinkelung

Material

Copolymeres hydrophiles Acrylat,
Wassergehalt 25 %


Optikdesign

- Multifokales Prinzip: progressive IOL mit erweitertem Schärfentiefebereich (extended depth of focus - EDOF)
- Bikonvex progressiv
- Rückwärtige torisch asphärische Oberfläche
- Nahaddition von +3,25 dpt
- Bikonvex progressiv
- Umlaufend doppelt scharfe Kanten zur Nachstarreduktion
- Sphärische Abberation von -0,14 µm

Optimierte IOL-Konstanten*

Haigis	HofferQ	HofferQST	Holladay I	SRK/T	Kane
a0=-1,256 a1=0,080 a2=0,242	pACD=5,29	pACD=5,21	sf=1,54	A=118,59	A=118,36
Barrett	Olsen		EVO		
LF=1,48 A=118,23	C-Konstante=0,346 ACD=4,62		118,35		

Dioptrienbereich sphärisches Äquivalent (SEQ)

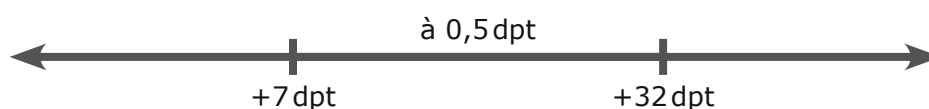

Dioptrienbereich Zylinder

