




## Punctum Plugs

Diese Punctum Plugs von OASIS verschließen den Tränenweg temporär. Dadurch wird der Tränenfluss reduziert und die Augenflüssigkeit erhöht. Sie sind damit eine Möglichkeit zur Behandlung trockener Augen.

### FORM FIT® - für eine lange Okklusion

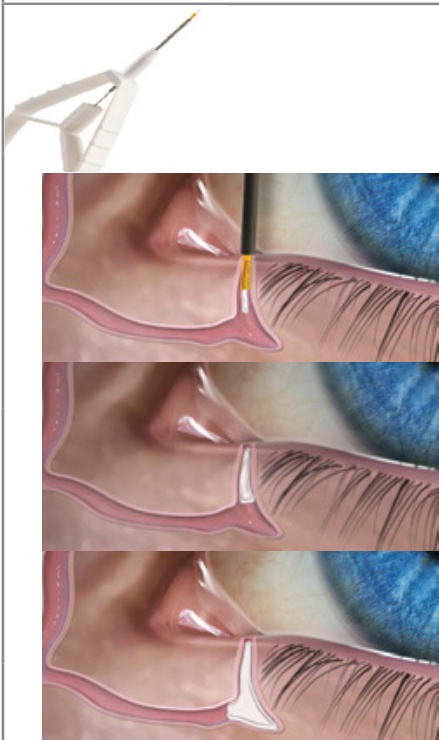

FORM FIT® ist ein intrakanalärer Punctum Plug in einer wahren Einheitsgröße. Einmal in den Tränenweg eingebracht, hydriert FORM FIT® und vergrößert sich in etwa 10 Minuten bis er den Kanal voll ausfüllt.

So funktioniert ´s:

Das sichere, biokompatible Hydrogelmaterial des FORM FIT® wird durch Kontakt mit dem Tränenfilm gelartig und verschließt den Tränenkanal zuverlässig. FORM FIT® passt sich dem vertikalen Tränenkanal an so dass kein Verschluss am Ende des Plugs notwendig ist. Das erhöht den Komfort für den Patienten deutlich und senkt das Fremdkörpergefühl.

Produkteigenschaften:


- Hydriert in ca. 10 Minuten
- Einfache Entfernung durch Spülen des Tränenkanals
- Biokompatibel, kein Fremdkörpergefühl
- Steril
- Bequem im Injektor vorgeladen
- 0,3 mm Einheitsgröße



STERILE

FORM FIT, VPE (10 Stück) Art. 6303/W20 10044051  
FORM FIT, VPE (2 Stück) Art. 6303-T/W20 10044051

### SOFT PLUG® - für eine mittellange Okklusion

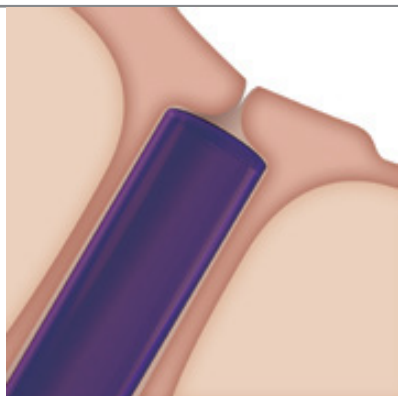

Hersteller der Punctum Plugs:  
OASIS

SOFT PLUG® Extended Duration Punctum Plugs sind absorbierbare Okkluder für den Tränenweg. Sie sind eine effektive Option bei vorübergehenden Symptomen des trockenen Auges z. B. vor oder nach einer Operation sowie saisonal. Auch ideal für Patienten, die eine nicht-permanente Option für den Tränenwegsverschluss testen möchten. Hält bis zu 180 Tagen.

Produkteigenschaften:

- Prä- und postoperativer Einsatz
- Steril
- Einsetzen mit Pinzette
- 2 mm lang



STERILE

SOFT PLUG Variety Pack:  
3 Paar 0,3 mm, 4 Paar 0,4 mm, 3 Paar 0,5 mm  
Art. 6200V/W20 10044053

### Universalpinzette



Moorfields Nahtpinzette  
14 mm schmal gezahnte Plattform, Gesamtlänge 107 mm  
1 VPE (10 Stück) Art. 10-1311/W20 10045265  
Hersteller: Blink Medical



STERILE

## Produkte für konservative Augenärzte